



pdv-lims3: Wichtigste Neuerungen Version 1.32

Version 1.32 bietet Ihnen zahlreiche Verbesserungen, die insbesondere das Arbeiten mit pdv-lims3 vereinfachen oder beschleunigen, z.B. durch vorgelegte Felder bei der Dateneingabe, mehr Performance beim Aufklappen umfangreicher Navigationsbäume oder einer verkürzten Benutzerführung. Diese und weitere wesentliche neue Funktionen und Features finden Sie nachfolgend zusammengefasst.

Optimierungen bei der Übernahme von Proben im Probeneingang

Für die Auswahl der zur Übernahme bereitstehenden Proben steht eine Tabelle zur Verfügung. Diese zeigt

- das Datum, an dem die Probenankündigung eingetragen wurde (eingefügt),
- das Datum, an dem die Probenankündigung ggf. verändert wurde,
- die Referenz der angekündigten Probe.

Die Proben werden nach dem "Eingefügt"-Datum sortiert; aktuelle Einträge stehen somit in der Liste oben. Zusätzlich stehen Ihnen die bekannten Filtermöglichkeiten für Tabellen zur Verfügung.

Auswählen	Eingefügt	Geändert am	ERP-Nummer	Mandant
<input type="checkbox"/>	29.08.2023 08:27:20	21.09.2023 09:41:45		L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:21	21.08.2023 14:33:21	769ExtNo3	L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:21	21.08.2023 14:33:21	769ExtNo2	L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:20	21.08.2023 14:33:20	769ExtNo1	L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:20	21.08.2023 14:33:20	768ExtNo4	L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:20	21.08.2023 14:33:20	768ExtNo3	L2L
<input type="checkbox"/>	21.08.2023 14:33:19	21.08.2023 14:33:19	768ExtNo2	L2L

Sind die von einem externen ERP-System im Rahmen der Probenankündigung übertragenen Text-Informationen zu lang für die vorgesehenen Felder in pdv-lims3, werden die Inhalte automatisch gekürzt. Dem Anwender wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Beschleunigte Auftragsauswahl

Bleibt im tabellarischen Probeneingang nach dem Filtern nur noch ein Auftrag übrig, gelangen Sie mit der Schaltfläche "Weiter" direkt zum gewählten Auftrag, ohne ihn zuvor in der Tabelle markieren zu müssen.

Vorgelegte Prüfpräzision für Parameter

Zur Erleichterung bei der Konfiguration wird an zahlreichen Stellen im Management-Bereich die Prüfpräzision automatisch mit dem Format des zugehörigen Parameters vorgelegt:

- für Grenzwerte,
- für Nachweis-, Bestimmungs- und Abgabegrenzen eines Analyseparameters (in den Stammdaten),
- für Abgabegrenzen eines Auftragsparameters in der Probenverarbeitung.

Bemerkungen zu Grenzwerten und Spezifikationen

Bei der Erfassung von Ergebnissen (Messwerte, Analyse, Eingabegruppen, Formulare) können Sie in den Details bei den Grenzwerten – neben den konkreten Grenzen – auch die Bemerkungen zum Grenzwert und der Spezifikation einblenden. Wo Spezifikationen ausgewählt oder angezeigt werden, kann die Bemerkung zur Spezifikation mit angezeigt werden.

Vorbelegte Standardwerte für den Analysenumfang

Wenn Sie über die Funktion "Analysenumfang ändern" neue Analysen einer Messung hinzufügen, werden die Standardwerte (aus den Stammdaten oder dem Auftrag) für die Ergebnismwerte bereits vorbelegt.


Chargen in der Chemikalienverwaltung

Mehrere Verbesserungen gibt es für Chargen in der Chemikalienverwaltung.

So kann an der Charge die "Haltbarkeit nach Öffnen" als Information hinterlegt werden. Diese Angabe wird an allen Stellen, in denen die Charge angezeigt wird, ergänzt.

Auch das Anlegen von Dokumenten an Artikeln (Stoffen) wurde um die Charge erweitert. Somit können Sie Dokumente (z.B. Zertifikate mit Grenzwerten oder Lieferscheinen) direkt einer Charge hinzufügen. Dies kann bereits beim Einbuchen der Charge erfolgen. An allen Stellen, an denen die Charge angezeigt wird, ist der Zugriff auf die zugeordneten Dokumente möglich.

Änderungen an einer Charge können Sie nachträglich im Detaildialog zum Artikel vornehmen, um z.B. fehlende Informationen zu ergänzen oder Korrekturen vorzunehmen. Bisher war das nur über das Buchen von Lagerbewegungen möglich.

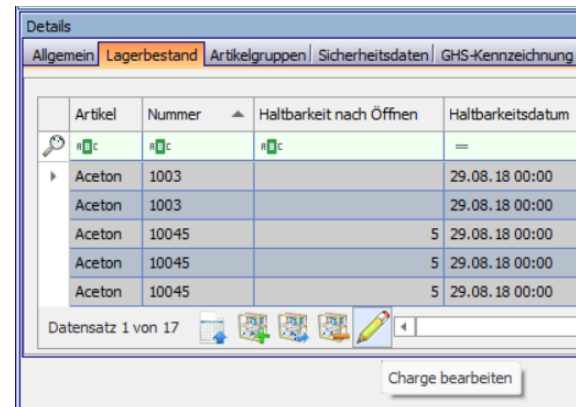

Artikel	Nummer	Haltbarkeit nach Öffnen	Haltbarkeitsdatum
Aceton	1003		29.08.18 00:00
Aceton	1003		29.08.18 00:00
Aceton	10045	5	29.08.18 00:00
Aceton	10045	5	29.08.18 00:00
Aceton	10045	5	29.08.18 00:00

Mehr Kontrolle mit pdv-lims3 mobile

An Messergebnissen, die über die App pdv-lims3 mobile erfasst werden, wird protokolliert, welcher Anwender angemeldet war. Damit kann der Laborleiter im AuditTrail einsehen, über welchen Zugang ein Wert erfasst bzw. verändert wurde.